


Przygotowanie przesyłki dla kuriera krok po kroku

Przygotuj:

- a) Kartonowe lub plastikowe pudełko (A)
- b) Uzupełniony formularz zlecenia badania (B)
- c) Kopertę bąbelkową (C)
- d) Czarny marker lub flamaster (D)
- e) Kompres/gaza
- f) Woreczek
- g) list przewozowy

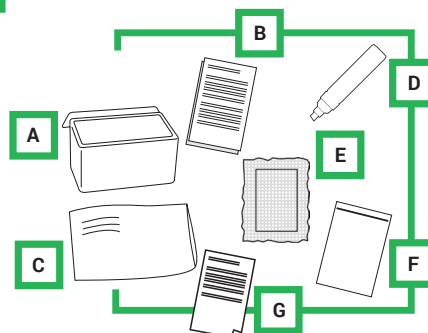


Ważne: Do badania nie przyjmujemy całych płodów!


1. Zakrętkę sterylnego pojemnika (z materiałem z poronienia w soli fizjologicznej) oklej dookoła taśmą klejącą, plastrem lub parafilmem, tak aby nie doszło do rozlania soli fizjologicznej.



2. Pojemnik z solą obłóż dookoła kompresem lub gazą. Następnie włóż do woreczka.

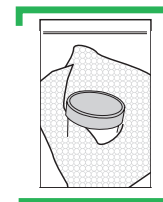

3. Zabezpieczony pojemnik umieść w sztywnym opakowaniu, np. małym kartonie lub plastikowym pudełku itp.

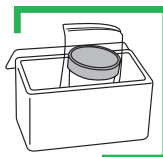


4. Wolne przestrzenie między opakowaniem a pojemnikiem wypełnij folią bąbelkową, watą lub papierem, aby uniknąć przesuwania pojemnika w czasie transportu. Przy wysokich temperaturach zalecamy włożenie wkładów chłodzących (są dostępne w aptekach).



5. Do koperty bąbelkowej zapakuj:

- a) Kartonowe/plastikowe pudełko z materiałem w soli fizjologicznej
- b) Formularz zlecenia badania

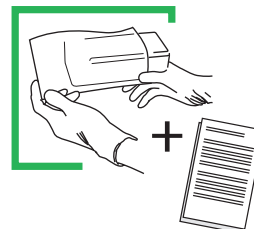


6. Jeśli posiadasz list przewozowy przyklej go na kopertę lub zaadresuj:

Laboratorium testDNA

ul. Dulęby 7, 40-833 Katowice

oraz napisz dużymi literami informację dla kuriera:

UN3373 Biological Substance Category B.

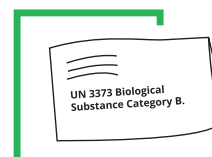

7. Tak zapakowaną przesyłkę przekazaj kurierowi.

